

PCR検査キット(簡易検査)を1,000円で提供します

感染症状はないが感染に不安のある方、高齢者福祉施設で働いている方などを対象に、市が購入したPCR検査 唾液採取用検査キット(簡易検査)を自己負担額1,000円で提供します。

【対象者】※発熱などの症状がなく、接触者に該当しない方が対象です。

- ①秩父市内にお住まいの方
- ②秩父市内に在勤・在学・在園の方

※検査結果が「高リスク」の場合には、必ず地域医療対策課へ連絡することなどについて、同意していただきます。

受付開始

令和3年2月10日から
※土・日曜日、祝日を除く

自己負担額

1,000円
(1キット)

注意事項

必ず別紙の注意事項
をご確認ください

受付時間

9時から16時まで
※12時から13時までを除く

提供回数
複数回可

提供キット(簡易検査)

PCR検査 唾液採取用検査キット

- ・医師が診断しない保険適用外の唾液採取用検査キットです。
- ・検査結果は「高リスク」、「低リスク」をお知らせしますが、陽性、陰性の判定は行われません。
- ・必ず、申し込みをした本人が使用してください。

PCR検査 唾液採取用キット セット内容



注意事項

採取前30分程度は、飲食や歯磨き、うがい薬を使用したうがいはしないでください。また、採取時はなるべく清潔な環境で手を洗い、水で軽く口をゆすいであらってから採取してください。

※団体等で検査を希望される場合には、事前に下記までお問い合わせください。

- ①住所・氏名のわかるもの(免許証や健康保険証など)、市内に在勤・在学・在園していることがわかるもの(社員証など)をご提示ください。
- ②検査の内容について、確認後、同意していただきます。その後、検査キットと「確認事項・注意事項」が記載された用紙をお渡ししますので、必ず、ご確認ください。
- ③ご自宅などで唾液を採取し、WE配サービスにより回収を依頼します(裏面参照)。
- ④検査センターから指定のメールアドレス、ショートメール(SMS)、郵送のいずれかで結果が通知されます。

【問い合わせ先】

秩父市役所保健医療部地域医療対策課 電話0494-22-2279



検査の流れ



採取時に水で軽く口をゆすいでください。
①の唾液保存容器に付属の「ろうと」をしっかり取り付け、唾液を採取してください。
たんが混じるとよりよい結果が出ますので、喉元をマッサージして唾液を採取してください。

唾液を採取容器の「1~2ml」の目盛りくらいまで入れてください。
泡などなるべく入らないよう、お気をつけください。

※正しい検査のために唾液の量にご注意ください。

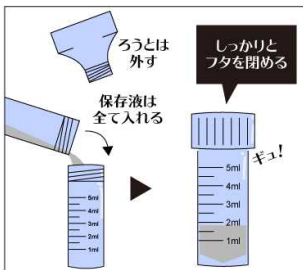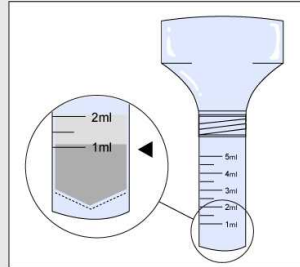



「ろうと」を外し、⑥の保存液を①の唾液保存容器に全て入れて、フタをしっかりねじ込んで締めてください。

※フタが締まっていないと検査が出来ない場合がございます。

※「ろうと」はプラごみとして捨ててください。

フタをした唾液保存容器へCのナンバリングシールを貼り付け、⑤のお申し込み用紙へもナンバリングシールを貼ります。

※ふたに被らないように容器本体に貼ってください。

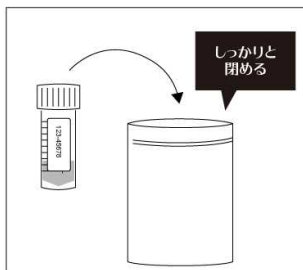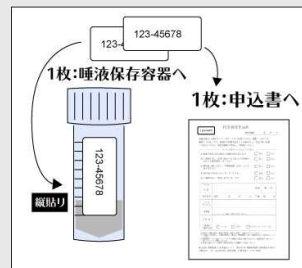

唾液保存容器を密封袋へ入れます。
密封袋がしっかり閉じているか確認してください。

※密封されていない場合、正しい測定が出来ない場合がございます。

⑤のお申し込み用紙へ必要事項などを明記してから、Fの返信用封筒へ「唾液保存容器が入った密封袋」と「お申し込み用紙」、「ナンバリングシール」を入れて、封筒を閉じてください。
封筒の裏面には差出人のお名前と住所をご記入ください。

